

DHEAS, S-

Klinisk kemi

Remiss

Cosmic: Finns att beställa under Endokrinologi.

Kortkod på etikett: DHEAS

Remiss: Laboratoriemedicin Remiss 6.

ID-kontroll

För utförande av korrekt identitetskontroll se dokument [ID-kontroll](#).

Provtagning


Provtagningsmaterial: Serumrör med gel, (innehåller koagulationsaktivator), guldgul propp.



Provmaterial: Serum

Provvoly: Minst 1 mL blod

Om venös provtagning inte är möjlig ta minst 400 µL blod i Microtainerrör med gel, gul propp.

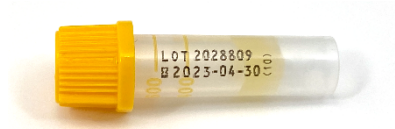

Provhantering

Centrifugeras inom 4 h.

Serum hållbart 7 dygn vid 2 - 8 °C. Transporteras från enhet inom Region Västerbotten, i kyla grå SofiaBox.

Vid längre förvaring fryses separerat serum vid -20 °C eller lägre och transporteras från enhet inom Region Västerbotten, fryst i grön SofiaBox.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00376-2

Giltigt fr o m 2026-01-30

DHEAS, S-

Klinisk kemi

Indikation

Misstänkt överproduktion av androgener hos kvinnor.

Referensintervall, beslutsgräns

Enhet: $\mu\text{mol/L}$

Ålder (år)	Män	Kvinnor
< 1 vecka	2,9 - 16,5	2,9 - 16,5
1-4 veckor	0,86 - 11,7	0,86 - 11,7
1-12 månader	0,09 - 3,4	0,09 - 3,4
1-4 år	0,01 - 0,53	0,01 - 0,53
5-10 år	0,08 - 2,3	0,08 - 2,3
10-14 år	0,66 - 6,7	0,92 - 7,6
15 - 19 år	1,9 - 13,4	1,8 - 10,0
20 - 24 år	5,7 - 13,4	4,0 - 11,0
25 - 34 år	4,3 - 12,2	2,7 - 9,2
35 - 44 år	2,4 - 11,6	1,7 - 9,2
45 - 54 år	1,2 - 9,0	0,96 - 7,0
55 - 64 år	1,4 - 8,0	0,51 - 5,6
65 - 74 år	0,91 - 6,8	0,26 - 6,7
> 75 år	0,44 - 3,3	0,33 - 4,2

Interferens/felkällor

Högdosbehandling med biotin (>5 mg/dygn) kan störa analysen.

Vissa typer av antikroppar i patientprover kan störa analysen.

Hög nivå av reumatoid faktor kan störa analysen.

Svarsrutiner

Analyseras 1ggr/vecka

Från ankomst till analyserande laboratorium erhålls resultat vanligen inom en vecka.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00376-2

Giltigt fr o m 2026-01-30

DHEAS, S-

Klinisk kemi

Kommentar

Mätområde: 0,003 - 27 µmol/L

Ackrediterad

Ja.

Sparas i biobank

Nej.

Synonymer

Dehydroepiandrosteronsulfat, DHEA-S, DHEAs

Dokumentslut

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig utgåva finns på regionvasterbotten.se

Dokumentnummer 00376-2
Giltigt fr o m 2026-01-30